


Flexella Plus

Пищеводный нитиноловый стент



Flexella Plus

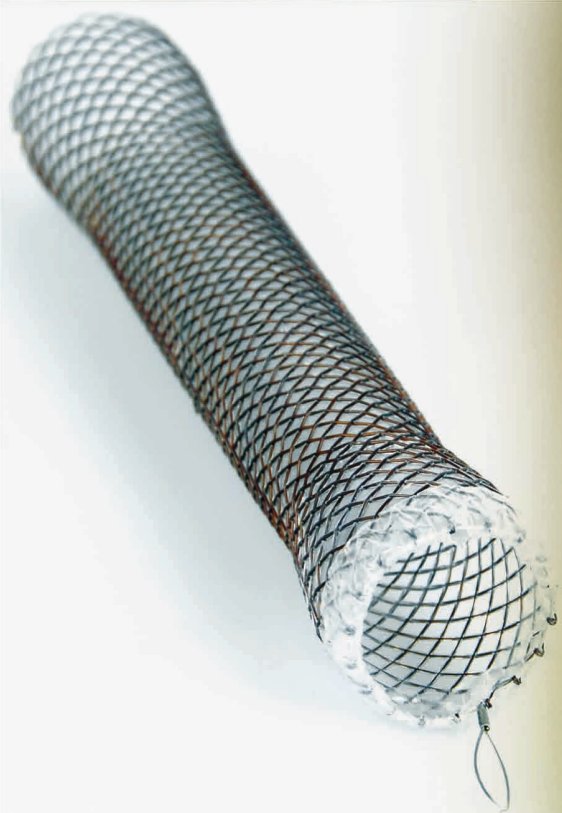

(843) 245 22 75
(843) 245 22 85
www.stents.ru
info@stents.ru

Уникальная система доставки PUSH - раскрытие стента с проксимального конца

Цельноплетеный полностью покрытый пищеводный стент

Удаляемый пищеводный стент

Атравматичные концы

Превосходная гибкость

Пищеводный стент Flexella Plus

Стент Flexella Plus предназначен для паллиативного лечения злокачественных стриктур пищевода, окклюзии эзофаго-респираторных свищей и доброкачественных стриктур, резистентных к стандартной терапии.

Установка под эндоскопическим и/или рентгеноскопическим контролем. Саморасправляющийся, полностью покрытый нитиноловый стент, помещенный в систему доставки.

Преимущества:


- ☑ **Два типа системы доставки: PUSH и PULL.**
PUSH система доставки – стриктуры верхней третьей пищевода.
PULL система доставки – стриктуры нижней третьей пищевода.
- ☑ **Атравматичные концы стента** – снижение риска гиперплазии и повреждения стенок пищевода.
- ☑ **Стальные петли с покрытием и золотыми маркерами** – возможность репозиции и удаления стента.
- ☑ **Превосходная гибкость** – проходимость стента по сложным анатомическим зонам пищевода.
- ☑ **Рентгенконтрастные платино/иридиевые маркеры в середине и на концах стента** – точная визуализация и позиционирование стента.
- ☑ **Силиконовое покрытие стента** – профилактика опухолевого прорастания, окклюзия эзофаго-респираторных свищей.

Дополнительная информация:

PUSH система доставки (модель 06S) имеет диаметр 4.7 мм/9.4 мм (14F /28F) и длину 55 см.

PULL система доставки (модель 07S) имеет диаметр 5.9 мм/9.4 мм (18F /28F) и длину 75 см.

Рекомендуется установка по сверхжесткому проводнику: 0,035" длиной минимум 220 см.

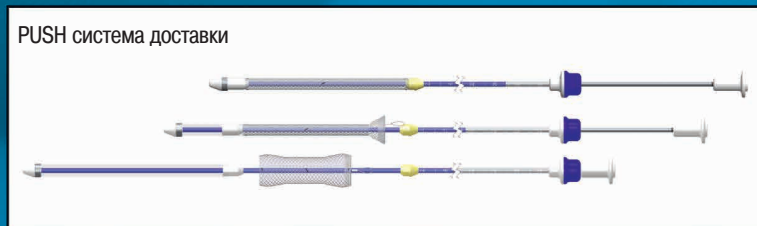

Доступные размеры:

Кат. №	Диаметр стента [мм]	Диаметр концов стента [мм]	Длина стента [мм]	Анти-рефлюксный клапан
019-06S-20-085	20	25	85	Нет
019-06S-20-110	20	25	110	Нет
019-07S-20-85	20	25	85	Нет
019-07S-20-110	20	25	110	Нет
019-07S-20-135	20	25	135	Нет
019-07S-20-150	20	25	150	Нет
019-07S-20-85-0	20	25	85	Да
019-07S-20-110-0	20	25	110	Да
019-07S-20-135-0	20	25	135	Да
019-07S-20-150-0	20	25	150	Да

Региональный представитель:

Производитель:
ELLA-CS, s.r.o., Czech Republic

Представитель в России:
ООО «Медэра»
г. Казань, пр. Ямашева, 36.
Тел: (843) 2452275, 2452285
E-mail: info@stents.ru www.stents.ru